

PRÉLÈVEMENTS DES ÉCHANTILLONS NASOPHARYNGÉS PAR ÉCOUVILLONAGE

MESURES DE PROTECTION

Les prélèvements sont faits dans une pièce avec porte fermée et en portant les équipements de protection :


- blouse
- masque chirurgical
- gants
- visière

MATÉRIEL

- Pour PCR *Bordetella pertussis/parapertussis* (coqueluche) :
E-Swab de Copan,, no de GRM : 50012006
- Pour PCR : - *Mycoplasma pneumoniae/Chlamydomphila pneumoniae*
- *Ureaplasma sp/Mycoplasma hominis*
- Virus respiratoires
Écouvillon «Flocked Swab» de Copan, no de GRM : 50011779
Milieu de transport UTM de Copan, no de GRM : 50011636

PROCÉDURE

- Se laver les mains.
- Revêtir les équipements de protection.
- Installer le patient en position assise, la tête légèrement ramenée vers l'arrière.
- Insérer l'écouvillon dans une des narines.
- Pousser l'écouvillon délicatement jusqu'à ce qu'une résistance soit ressentie. Vous êtes dans le nasopharynx.
- **Faire des mouvements de rotation pendant 20 secondes en appuyant légèrement sur la muqueuse pour obtenir des sécrétions.**

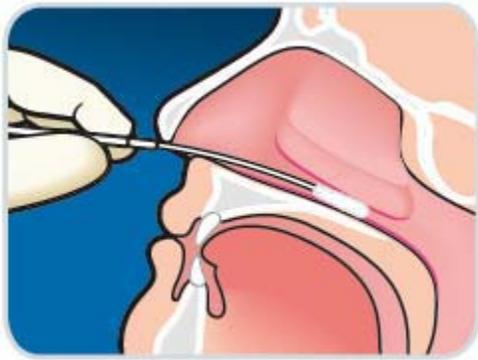

- Retirer l'écouvillon délicatement puis le déposer dans le tube de milieu de transport
- Couper la tige en la pliant sur l'ouverture du tube.
- Désinfecter l'extérieur du tube avec un tampon d'alcool et le remettre à quelqu'un à l'extérieur de la chambre dans le sac de biosécurité.
- Se dévêtir en suivant les mesures de prévention des infections.
- Remplir la requête de bactériologie ou de virologie selon l'analyse demandée.

Céline Laferrière, M.D.