



PRÉLÈVEMENTS DES ÉCHANTILLONS NASOPHARYNGÉS PAR ÉCOUVILLONNAGE

Céline Laferrière, M.D. – 2009-11-16

MESURES DE PROTECTION

Les prélèvements sont faits dans une pièce avec porte fermée et en portant les équipements de protection :


- blouse
- masque chirurgical
- gants
- visière

MATÉRIEL

- Écouvillon «Flocked Swab» de Copan , no de GRM : 50011779. À conserver au réfrigérateur.
- Milieu de transport viral, no de GRM : 50011636.

PROCÉDURE

- Se laver les mains.
- Revêtir les équipements de protection.
- Installer le patient en position assise, la tête légèrement ramenée vers l'arrière.
- Insérer l'écouvillon dans une des narines.
- Pousser l'écouvillon délicatement jusqu'à ce qu'une résistance soit ressentie. Vous êtes dans le nasopharynx.
- Faire des mouvements de rotation pendant 20 secondes en appuyant légèrement sur la muqueuse pour obtenir des sécrétions.

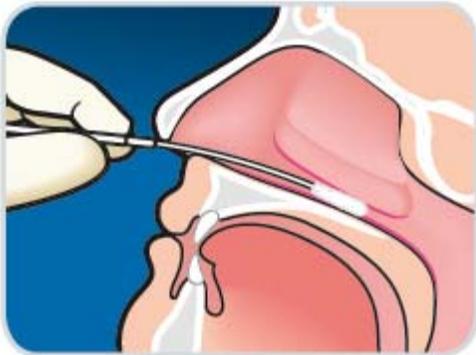

Source : <http://www.copanswabs.com/>

- Retirer l'écouvillon délicatement puis le déposer dans le tube de milieu de transport viral (liquide rose). Couper la tige en la pliant sur l'ouverture du tube.
- Désinfecter l'extérieur du tube avec un tampon d'alcool et le remettre à quelqu'un à l'extérieur de la chambre dans le sac de biosécurité.
- Se dévêtir en suivant les mesures de prévention des infections.
- Bien compléter la requête de virologie en spécifiant dans la section biologie moléculaire (PCR) :

PCR influenza A H₁N₁

- Mettre dans un sac de biosécurité avec la requête dans la pochette extérieure du sac
- Transporter immédiatement au laboratoire de virologie le jour, au laboratoire de microbiologie le soir et la nuit.